



Der Langzeit-EKG Recorder, der seinen Namen wirklich verdient: TELESMART

- Bluetooth™ Technologie für effiziente Recorder-Vorbereitung
- Bis zu 7 Tage Aufnahmedauer mit 3 unabhängigen EKG-Kanälen
- Energieversorgung mit nur 1 Batterie
- 12 Bit EKG-Aufzeichnung für höchste Signalqualität
- Sprachaufzeichnung und Übertragung von Patientendaten
- Grafikdisplay zur Anlagekontrolle bei einfacher Bedienung
- 3- bis 7-polige Patientenkelabel mit automatischer Erkennung



TELESMART HOLTER RECORDER


Der TELESMART bietet Ihnen... wichtige Innovationen für Ihre Flexibilität und Effizienz.



...Innovationen für die Praxis. Mit dem TELESMART setzt Medset neue Maßstäbe für die Langzeit EKG-Diagnostik. Mit Hilfe neuester Technologien vereint der TELESMART beste Aufzeichnungsqualität mit modernem Design und höchster Patienten-Compliance. Die flache Gehäuseform und sein geringes Gewicht sorgen auch bei langen Tragedauern für besten Komfort.

...Immer optimal für Ihren „Workflow“. Wie auch immer Ihr „Workflow“ ist, der TELESMART passt immer! Je nach Fragestellung steht Ihnen das optimale Patienten-kabel zur Verfügung. 2 oder 3 Kanäle mit 3, 5 oder 7 Elektroden – der TELESMART erkennt das richtige Patienten-kabel automatisch. Zur Anlagekontrolle können Sie das EKG „live“ auf dem PC-Monitor verfolgen oder – falls sich Ihr Patient außerhalb der Reichweite Ihres PADS-PC befindet – auch auf dem Recorder-Display anzeigen lassen. Ob der Patient zu Ihnen kommt oder Sie zum Patienten, der TELESMART ist vorbereitet. Das hochauflösende Display zeigt Ihnen alle notwendigen Bedienschritte. Drahtlos werden Patientendaten mit Bluetooth™ übertragen und im Recorder gespeichert. Sind die Stammdaten noch nicht erfasst, diktieren Sie einfach den Patientennamen in das integrierte Mikrofon.

...Alles für eine sichere EKG-Diagnostik. Höchste Signalqualität und intelligente Software-Werkzeuge beantworten schnell und eindeutig Ihre Fragen zum Herzrhythmus Ihrer Patienten. Die 12 Bit-Signalaufösung hilft bei der sicheren Beurteilung der P-Welle. Eine hochwertige Verstärkerelektronik bildet die EKG-Komplexe verzerrungsfrei ab und ein eingebauter Schrittmacher-Detektor erkennt sicher die Schrittmacher-Spikes. Seltene Symptome, wie Synkopen oder kurze Vorhofflimmer-Episoden, können Sie nur mit langen Aufzeichnungsdauern erkennen. Der TELESMART bietet deshalb mit nur einer Batterieladung eine Aufzeichnungsdauer bis zu 7 Tage ohne Unterbrechung.

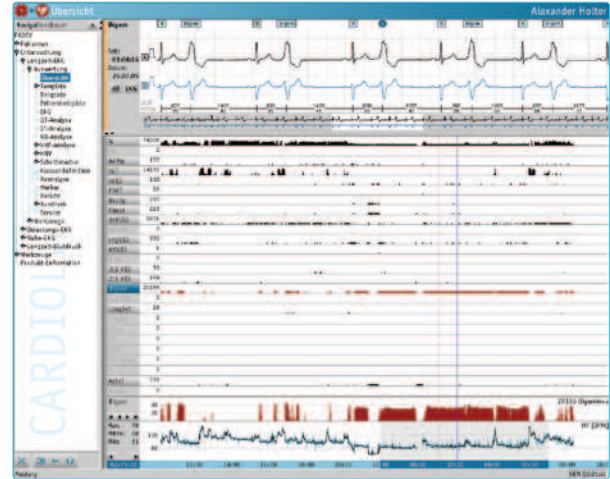

Leistungsmerkmale

Recorder TELESMART:

- Ergonomisches Design mit zentraler Event-Taste
- Einfache Bedienung durch Menüführung mit nur 3 Tasten
- Großes Grafik-Display mit 5 Zeilen (46 x 23) mm
- Online-EKG auf dem Display
- Spracheingabe für nachträgliche Patientenzuordnung
- Aufzeichnungsdauer bis 7 Tage
- EKG-Speicherung auf wechselbarer CF-Speicherkarte
- Schrittmacher-Spike-Erkennung

Bluetooth™-Funkschnittstelle für:

- PC-gestützte Online-EKG-Kontrolle
- Patientendatenübertragung

EKG-Ableitung über kodierte Patientenkabel:

- 3 Elektroden für 3 EKG-Kanäle
- 5 Elektroden für 2 unabhängige EKG-Kanäle
- 7 Elektroden für 3 unabhängige EKG-Kanäle

Allgemeine Daten:

- Stromversorgung: 1 Mignon Batterie oder Akku
- Abmessungen: (122 x 65 x 20) mm
- Gewicht: ca. 130 g inkl. Batterie

Wir übernehmen keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in unserer Broschüre bereitgestellten Informationen.



designed for
PADSY

PRS 15.00.301-04

MEDSET Medizintechnik GmbH + Postfach 800 103 + D-21001 Hamburg
Fon ++49 (0) 40/725 822-0 + Fax -11 + www.medset.com + E-mail an: info@medset.com

medset
INNOVATION IN CARDIOLOGY