


RR Time - Zuverlässige Messgenauigkeit mit einfacher Handhabung

- 👉 Bewährte Mess- und Entlüftungstechnologie
- 👉 Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Dual-Prozessoren
- 👉 Geräuscharm, leicht und benutzerfreundlich
- 👉 Einfache PC-Verbindung über integrierte USB-Schnittstelle

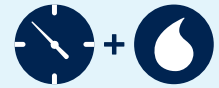

Technische Daten

- Messverfahren: Oszillometrie mit linearer Deflation
- Messbereich: systolisch 60 – 290 mmHg, diastolisch 30 – 195 mmHg
- Genauigkeit: ± 3 mmHg
- Messintervalle: 4 unabhängig programmierbare Intervalle
- Stromversorgung: 2 AA-Batterien
- Datenübertragung: USB-Schnittstelle
- Abmessung: 113 x 75 x 26 mm
- Gewicht: 168 g (ohne Batterien)

Zubehör

- Manschette S (20–24 cm)
- Manschette M (24–32 cm)
- Manschette L (32–38 cm)
- Rekordertasche
- USB-Kabel

Bewährte Mess- und Entlüftungstechnologie

Das Gerät arbeitet mit einer bewährten Technik zur Befüllung und Entleerung der Manschette. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Drucksteuerung und eine robuste Funktionsweise über die Einsatzzeit hinweg.

Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Dual-Prozessoren

Dank zwei leistungsstarker Prozessoren, die parallel arbeiten, gewährleistet das System eine kontinuierliche und sichere Überwachung. Dies maximiert sowohl die Funktionszuverlässigkeit als auch den Schutz der Patienten während der Anwendung.

Geräuscharm, leicht und benutzerfreundlich

Der RR Time zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und die leise Arbeitsweise aus. Zusammen mit dem gut lesbaren OLED-Display bietet es dem Patienten und dem medizinischen Fachpersonal hohen Komfort sowie eine optimale Benutzererfahrung.

Einfache PC-Verbindung über integrierte USB-Schnittstelle

Mit der eingebauten USB-Schnittstelle kann der RR Time problemlos an einen PC angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine direkte Datenübertragung an PADS Y RR und erleichtert die Weiterbearbeitung, Archivierung und Auswertung der Messergebnisse.